

パルスオキシメータ装着方法

1 寝る前に、パルスオキシメータを利き手と反対の手首に取り付けます。マジックテープは強く締めすぎないでください。

※手指、機器を消毒される場合は付属の消毒綿をお使いください。消毒後はよく乾かしてください。



2 きつくない指（小指でも検査できます）にプローブ（本体から出ている部品）を取り付けます。


※指のマークがついている方を爪側に取り付けてください。

※爪の付け根にセンサー部があたるように装着してください【図①】



サックタイプ 巻くタイプ はさむタイプ

【図①】

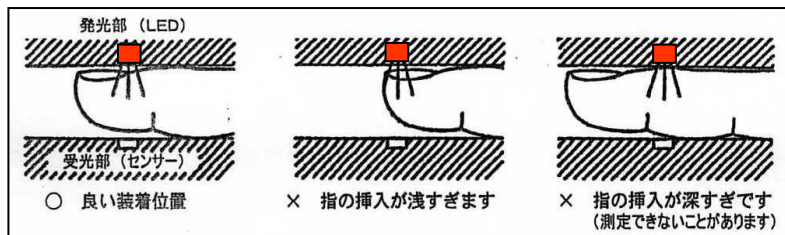


○ 良い装着位置


× 指の挿入が浅すぎます

× 指の挿入が深すぎです (測定できないことがあります)


3 プローブの外れを防ぐために、ケーブルを粘着テープ・絆創膏などで固定します。

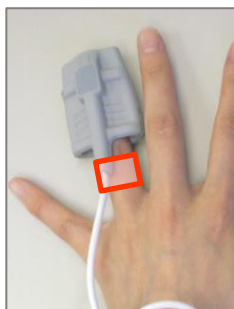

サックタイプ

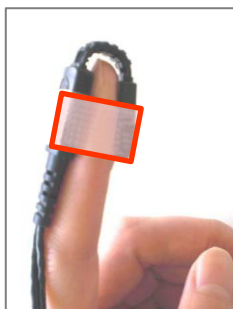

巻くタイプ

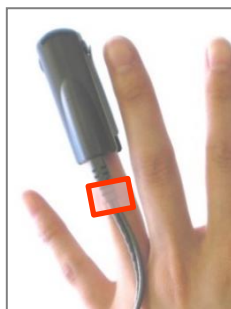

はさむタイプ

※装着前に指の汚れや水分を十分ふき取ってください。

※赤色部分を固定してください。血流を阻害するおそれがありますので、強く締めすぎないようにご注意ください。

※ずれたり、外れたりすると、再検査の対象になりますのでお気をつけください。

4 ① 電源スイッチ（水色）を表示が出るまで長押ししてください。



※左側のレベルメーターが脈拍にあわせて上下していることを確認してください。動いていないようなら、電源スイッチを切り、プローブを付け直してみてください。

※ ○ 内の数値が95以上に表示されていることを確認してください。

※途中で起きたり、はずれたりしても、電源は切らないでください。

※判定には最低4時間以上の連続したデータが必要です。

※電源は10時間後に自動的に切れます。

それでは測定開始です

5 起きたら、電源スイッチを長押しして電源を切ってください。**測定終了です。**パルスオキシメータを指や腕から外し、ケースに入れてください。

6 「睡眠に関するアンケート」を記入してください。

※**機器番号、順番**（1台で複数人検査した場合）、**検査した日時**はデータ照合に必須ですので必ず記入してください。また**署名欄**に記入がないと検査を進めることができませんのでご注意ください。

7 アンケートとパルスオキシメータを返却してください。

おつかれさまでした！！

