

# パルスオキシメータ装着方法 (PULSOX-500i)

1

寝る前に、パルスオキシメータを利き手と反対の手首に取り付けます。マジックテープは強く締めすぎないでください。

※手指、機器を消毒される場合は付属の消毒綿をお使いください。消毒後はよく乾かしてください。



2

きつくない指（小指でも検査できます）にプローブ（本体から出ている部品）を取り付け、外れを防ぐために、ケーブルを粘着テープ・絆創膏などで固定します。

※装着前に指の汚れや水分を十分ふき取ってください。

※指のマークがついている方を爪側に取り付けてください。

※爪の付け根にセンサー部があたるように装着してください【図①】


※赤色部分を付属のばんそうこう等で固定してください。血流を阻害するおそれがありますので、強く締めすぎないようにご注意ください。【図②】

※ずれたり、外れたりすると、再検査の対象になりますのでお気をつけください。

【図①】



【図②】

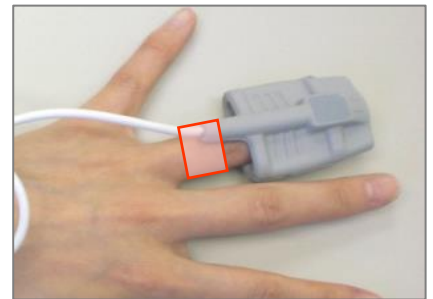

3

電源スイッチを押してください。

※途中で起きたり、外れたりしても、電源は切らないでください。

※判定には最低4時間以上の連続した睡眠データが必要です。（睡眠時間が4時間でも、解析できるデータが4時間に満たないと、判定不能と判断される場合があります。できるだけ**5時間以上の睡眠**をお取りください）

それでは測定開始です

測定データ記録表示(RECアイコン)  
測定データを記録している場合に  
表示されます。

脈波レベルメータ  
2本以下の場合は、指をマッサージして  
温めるなど、血行を良くしてから装着し  
なおして下さい。


測定経過時間  
時:分:秒で表示します。

電池残量

酸素飽和度(SpO2)  
95以上に表示されていることを確認してください。

電源スイッチ  
10時間で自動的に電源が切れます。

脈拍数

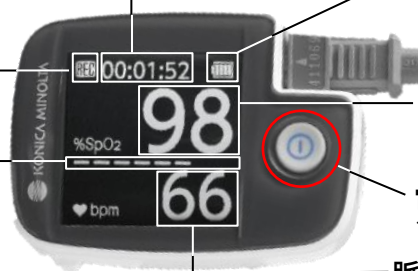

4

起きたら、電源スイッチを押して電源を切ってください。**測定終了です。**  
パルスオキシメータを指や腕から外し、ケースに入れてください。

5

「睡眠に関するアンケート」を記入してください。

※**機器番号**、**順番**（1台で複数人検査した場合）、**検査した日時**はデータ照合に必須ですので必ず記入してください。また**署名欄**に記入がないと検査を進めることができませんのでご注意ください。

6

アンケートとパルスオキシメータを返却してください。

おつかれさまでした！！

